

DE

**KATEGORIE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG GEMÄSS
EUROPÄISCHER VERORDNUNG 2016/425****GEFERTIGT NACH EN ISO 16321-1:2022**

Dieser Informationshinweis muss während der gesamten Lebensdauer der verwendeten PSA aufbewahrt werden.

A) HERSTELLERINFORMATIONEN

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

E-Mail: info@larident.it - Website: www.larident.it

B) REGULATORISCHE HINWEISE

Dieser Informationshinweis soll Klarheit über die Schutzeigenschaften, die Verwendungsbedingungen, die Wartung, das Waschen und die Warnhinweise und/oder Einschränkungen bei der Verwendung der PSA-Schutzvisiere schaffen. Die PSA kann nur dann das erforderliche Schutzniveau bieten, wenn sie intakt ist, richtig getragen und befestigt wird. Wenn Sie Zweifel haben oder eine Klärung wünschen, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten und gegebenenfalls an den Hersteller und konsultieren Sie die Betriebsanleitung.

Der Informationshinweis liegt jeder Packung bei und sollte vor dem Gebrauch sorgfältig gelesen werden. Dieser Informationshinweis wurde in Übereinstimmung mit EN ISO 16321-1:2022 erstellt.

Die PSA wurde als PSA der Kategorie II für Geräte zertifiziert, die dazu bestimmt sind, den Träger gegen die Gefahr zu schützen, von leichten Stößen mit Fremdkörpern getroffen zu werden; gemäß den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der europäischen Verordnung 2016/425. Das Gerät R5 erfüllt die Anforderungen der Norm UNI EN ISO 16321-1:2022, mit Ausnahme des Sichtfelds, das im oberen Bereich eingeschränkt ist. Die Sicht nach vorn und unten ist gewährleistet.

C) IDENTIFIZIERUNG DES MODELLS DER SCHUTZEINRICHTUNG

Schutzvisier R5 - Rahmen mit 6 transparenten Polycarbonatscheiben.

D) ANWEISUNGEN FÜR LAGERUNG, BENUTZUNG UND WARTUNG**• Trageanleitung**

Tragen Sie die PSA und positionieren Sie sie richtig auf dem Gesicht, so dass der Schutzschild das Gesicht an den richtigen Stellen bedeckt, und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt, indem Sie die Schnürung entsprechend der Gesichts-/Kopfgröße des Benutzers anpassen. Die Leistungsfähigkeit der PSA ist gewährleistet, wenn sie richtig getragen und positioniert wird. Wenn eine Verschlechterung sichtbar ist, stellen Sie die Verwendung ein und ersetzen Sie sie durch ein neues Gerät.

Änderungen der PSA sind nicht zulässig.

• Größen

Das Gerät ist in einer Einheitsgröße erhältlich, passt sich aber dank des verstellbaren Gummibands perfekt jeder Gesichtsform an.

• Verpackungshinweise und lagerungsanweisungen

Die Endverpackung des Erzeugnisses muss so erfolgen, dass sie während der gesamten Nutzungsdauer unverändert bleibt. Das betreffende Produkt hat kein Verfallsdatum. Das Produkt muss in der ungeöffneten und versiegelten Verpackung gelagert werden, fern von direkten Wärmequellen.

• Entsorgung

Wenn die Geräte nicht mit speziellen Stoffen oder Produkten kontaminiert sind, können sie als normaler Kunststoffabfall entsorgt werden, andernfalls müssen sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für Sonderabfälle entsorgt werden.

**E) BESONDERE REINIGUNGS- UND/ODER
DISINFIZIERUNGSANWEISUNGEN**

Um das Visier zu reinigen, befeuchten Sie ein Tuch mit alkoholfreien Seifen und Desinfektionsmitteln und wischen Sie vorsichtig über den Rahmen und die Scheibe, um Flecken und Schmutz zu entfernen.

**F) ANGABEN ZUM EINSATZBEREICH, ZUM VORGESEHENEN
EINSATZUMFELD, ZU DEN SCHUTZLEISTUNGEN UND ZU DEN
LEISTUNGSMERKMALEN**

Jede andere als die angegebene Verwendung gilt als unsachgemäß, und der Hersteller haftet nicht für etwaige Schäden.

Verwendete Materialien - Weitere Informationen finden Sie im Materialdatenblatt.

G) HINWEISE

- Schutzvisiere müssen ersetzt werden, wenn die Durchsichtigkeit durch Linien oder mögliche Trübungen beeinträchtigt ist.
- Visiere, die Stößen ausgesetzt waren, dürfen nicht verwendet werden und müssen entsorgt und ersetzt werden.
- Tragen Sie die PSA, bevor Sie sich dem Risiko aussetzen, gegen das die PSA konzipiert ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte Originalersatzteile.
- Die PSA muss in allen Teilen korrekt angelegt sein, um maximalen Schutz zu gewährleisten.

H) BENANNTE STELLE

Das Visier des Modells R5 gehört zur PSA-Kategorie II und benötigt daher eine EU-Typgenehmigung gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 durch eine benannte Stelle: Benannte Stelle Nr. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Mailand (MI)

Links zur Einhaltung der Konformität: info@larident.it.

I) KENNZEICHNUNG

Kennzeichnung auf der Linse

CE – LARIDENT – R5

CE (CE-kennzeichnung) – LARIDENT (Hersteller) – R5

(Produktbezeichnung)

Kennzeichnung des Rahmens

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Hersteller) – R5 (Produktbezeichnung) – CE (CE-kennzeichnung)

**J) VERWENDETE SYMBOLE AUF ANLEITUNGEN UND
KENNZEICHNUNGEN**

Die auf der Anleitung und der Schachtel verwendete Symbolik basiert auf der norm UNI EN ISO 16321-1:2022 und lautet wie folgt.




Symbol Anweisungen
sorgfältig lesen




CE-Konformitätszeichen

K) MONTAGEANLEITUNG


1. Drehen Sie den Rahmen so, dass die Stifte und Führungen zum Gesicht des Trägers zeigen.
2. Nehmen Sie das Visier und biegen Sie es leicht. Beginnen Sie in der Mitte und setzen Sie das Visier zuerst in die oberste Führung ein, dann schieben Sie es in die unterste. Drücken Sie anschließend die mittlere Öffnung in den mittleren Stift (horizontal), sodass das Visier eine runde Form annimmt.
3. Schieben Sie nun das Visier in die äußersten Führungen und drücken Sie die Öffnung mit den Fingern in den Stift (horizontal).
4. Setzen Sie das Visier in die beiden letzten Führungen ein und drücken Sie die Öffnung in den Stift (horizontal).
5. Decken Sie die Belüftungsöffnung mit der Schutzfolie ab.
6. Befestigen Sie zur zusätzlichen Sicherheit die elastische Schlaufe in der bequemsten Öffnung.
7. Das Visier ist einsatzbereit.

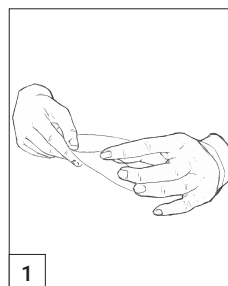


1

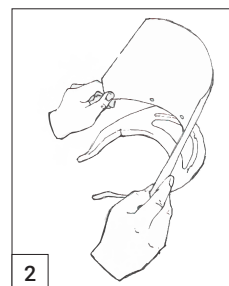


2

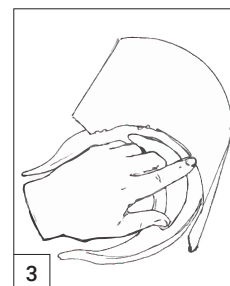


3

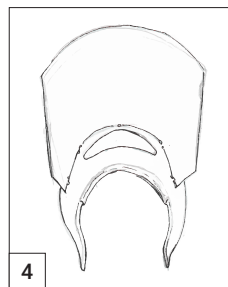


4

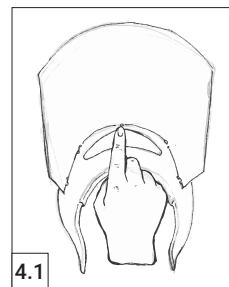

4.1

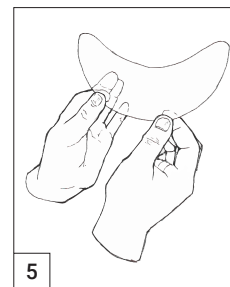

5

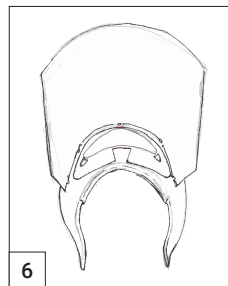

6



7