

EL

ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/425**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 16321-1:2022**

Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα πρέπει να φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του ΜΑΠ.

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - δικτυακός τόπος: www.larident.it

Β) ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα αποσκοπεί στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά προστασίας, τις συνθήκες χρήσης, τη συντήρηση, τις οδηγίες πλύσης και τις προειδοποιήσεις ή/και τους περιορισμούς χρήσης του ΜΑΠ «Προστατευτικές Προσωπίδες». Το ΜΑΠ μπορεί να παρέχει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας μόνο εάν είναι άθικτο, σωστά τοποθετημένο και ασφαλισμένο. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή αιτημάτων για διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τον προϊστάμενό σας και, εφόσον απαιτείται, με τον κατασκευαστή και συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το ενημερωτικό σημείωμα συνοδεύει κάθε συσκευασία και πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη χρήση της. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συντάχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 16321-1:2022. Το ΜΑΠ έχει πιστοποιηθεί ως ΜΑΠ κατηγορίας II για μέσα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του χρήστη από τον κίνδυνο ελαφρών κρούσεων από ξένα σώματα, σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/425. Η συσκευή R5 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου UNI EN ISO 16321-1:2022, εκτός από το οπτικό πεδίο, το οποίο περιορίζεται στο άνω μέρος. Η όραση προς τα εμπρός και προς τα κάτω είναι εγγυημένη.

Γ) ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προστατευτική προσωπίδα R5 - Σκελετός με 6 διαφανείς ασπίδες από πολυανθρακικό.

Δ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**• Οδηγισο τοποθέτησης**

Φορέστε το ΜΑΠ και τοποθετήστε το σωστά στο πρόσωπο, έτσι ώστε η ασπίδα να καλύπτει το πρόσωπο στα κατάλληλα σημεία, διασφαλίζοντας την καλή εφαρμογή του μέσω της ρύθμισης του ιμάντα ανάλογα με το πρόσωπο/κεφάλι του χρήστη. Οι επιδόσεις του ΜΑΠ διασφαλίζονται όταν αυτό είναι σωστά τοποθετημένο και εφαρμοσμένο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οπτικά οποιαδήποτε φθορά, διακόψτε τη χρήση του και προχωρήστε στην αντικατάστασή του με ένα νέο μέσο. Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στο ΜΑΠ.

• Μεγεθθ

Η συσκευή διατίθεται σε ένα μέγεθος, αλλά χάρη στο ρυθμιζόμενο ελαστικό ιμάντα προσαρμόζεται τέλεια σε οποιοδήποτε σχήμα προσώπου.

• Σημειώσεις για τη συσκευασία και οδηγισο φυλάξης

Η τελική συσκευασία του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να διατηρείται αναλλοίωτο μέχρι τη στιγμή της χρήσης και καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χρήσης. Το εν λόγω προϊόν δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε αέρας και σφραγισμένη συσκευασία μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας.

• Διαθεση

Εάν τα μέσα δεν έχουν μολυνθεί από συγκεκριμένες ουσίες ή προϊόντα, μπορούν να απορριφθούν ως κοινά πλαστικά απορρίμματα· σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για τα ειδικά απόβλητα.

Ε) ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Για τον καθαρισμό της προσωπίδας, υγράνετε ένα πανί με σαπούνια και απολυμαντικά χωρίς αλκοόλη και περάστε το απαλά πάνω στον σκελετό και στην ασπίδα, αφαιρώντας λεκέδες και ρύπους.

Φ) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κάθε χρήση διαφορετική από την ενδεδειγμένη θεωρείται ακατάλληλη και τυχόν ζημιές δεν μπορούν να αποδοθούν στον κατασκευαστή.

Χρησιμοποιούμενα υλικά - Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων των υλικών.

Γ) ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Οι προστατευτικές προσωπίδες πρέπει να αντικαθίστανται κάθε φορά που η διαφάνεια αλλοιώνεται λόγω γρατζουνιών ή τυχόν θολότητας.
- Οι προσωπίδες που έχουν υποστεί κρούσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται.
- Φορέστε το ΜΑΠ πριν εκτεθείτε στον κίνδυνο για τον οποίο έχει σχεδιαστεί το ΜΑΠ.

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Τα ΜΑΠ πρέπει να είναι τοποθετημένα σε όλα τα μέρη τους για να εξασφαλίζεται η μέγιστη προστασία.

Η) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Η προσωπίδα μοντέλο R5 ανήκει στην κατηγορία II των ΜΑΠ και, ως εκ τούτου, απαιτεί την έκδοση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425, από κοινοποιημένο οργανισμό: Κοινοποιημένος οργανισμός αριθ. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Μιλάνο (MI)

Σύνδεσμος συμμόρφωσης: info@larident.it.

Ι) ΣΗΜΑΝΣΗ

Ταυτοποίηση σήμανσης στον φακο

CE – LARIDENT – R5

CE (Σήμανση CE) – LARIDENT (Κατασκευαστής) – R5 (Ονομασία προϊόντος)

Ταυτοποίηση σήμανσης στον σκελετο

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Κατασκευαστής) – R5 (Ονομασία προϊόντος) – CE (Σήμανση CE)

Ψ) ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στις οδηγίες και στο κουτί, βάσει του κανονισμού UNI EN ISO 16321-1:2022




Σύμβολο διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες




Σήμανση συμμόρφωσης CE

Κ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


1. Περιστρέψτε το πλαίσιο έτσι ώστε οι πείροι και οι οδηγιοί να είναι στραμμένοι προς το πρόσωπο του χρήστη.
2. Σηκώστε την προσωπίδα και λυγίστε την ελαφρώς. Ξεκινώντας από το κέντρο, τοποθετήστε πρώτα την προσωπίδα στον υψηλότερο οδηγό και, στη συνέχεια, σύρετέ την στον χαμηλότερο. Μόλις γίνει αυτό, πιέστε την κεντρική τρύπα στην κεντρική ακίδα (οριζόντια) έτσι ώστε ο ΜΑΠ να αρχίσει να παίρνει κυκλικό σχήμα.
3. Σε αυτό το σημείο, σύρετε την προσωπίδα στους εξωτερικούς οδηγούς και, στη συνέχεια, πιέστε την τρύπα στην ακίδα (οριζόντια) με τα δάχτυλά σας.
4. Τοποθετήστε την προσωπίδα στους δύο τελευταίους οδηγούς και, στη συνέχεια, πιέστε την τρύπα στην ακίδα (οριζόντια).
5. Χρησιμοποιήστε την μεμβράνη για να καλύψετε την οπή αερισμού.
6. Για πρόσθετη ασφάλεια, στερεώστε την ελαστική θηλιά εισάγοντάς την στην πιο άνετη τρύπα.
7. Η προσωπίδα είναι έτοιμη.

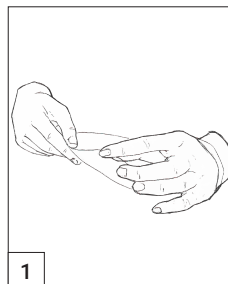


1

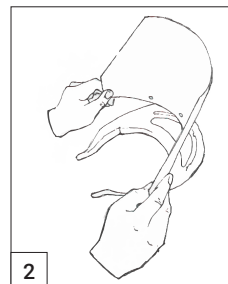


2

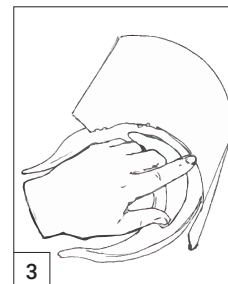


3

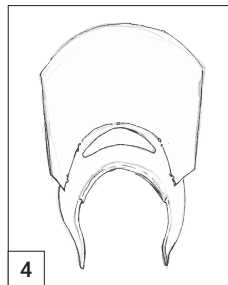


4

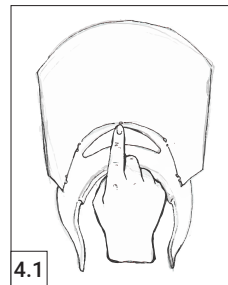

4.1

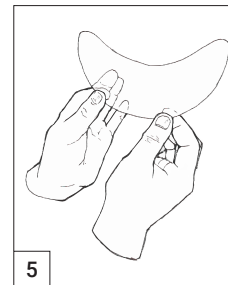

5

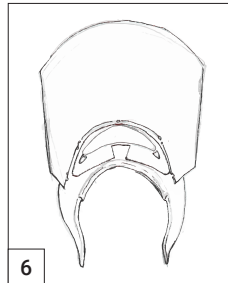

6



7