

FI

LUOKAN II HENKILÖNSUOJAIMET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EU) 2016/425 MUKAISESTI VALMISTETTU STANDARDIN UNI EN ISO 16321-1:2022 MUKAISESTI

Tämä tiedote on säilytettävä koko henkilönsuojaimen käyttöiän ajan.

A) VALMISTAJAN TIEDOT

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

sähköposti: info@larident.it - paikka: www.larident.it

B) VIITESTANDARDIT JA SÄÄDÖKSET

Tämän tiedotteen tarkoituksena on antaa selvitystä suojavaisiiri-henkilönsuojaimen suojausominaisuuksista, käyttöolosuhteista, huollosta, pesusta sekä käyttöä koskevista varoituksista ja/tai rajoituksista. Henkilönsuojain tarjoaa vaaditun suojatason vain, jos se on ehjä sekä oikein puettu ja kiinnitetty. Epäselvissä tapauksissa tai lisätietoja varten ota yhteys esimiehesei ja tarvittaessa valmistajaan sekä tutustu käyttöohjeeseen.

Tämä tiedote toimitetaan jokaisen pakkauksen mukana, ja se on luettava huolellisesti ennen käyttöä. Tämä tiedote on laadittu standardin UNI EN ISO 16321-1:2022 mukaisesti.

Henkilönsuojain (PPE) on sertifioitu kategoriaan II kuuluvaksi suojaimeksi, joka on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä vierasesineiden aiheuttamilta lieviltä iskuilta; Eurooppalaisen asetuksen 2016/425 olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. R5-laitte täyttää standardin UNI EN ISO 16321-1:2022 vaatimukset lukuun ottamatta näkökenttää, joka on rajoitettu yläosasta. Näkyvyys eteenpäin ja alaspäin on taattu.

C) SUOJAIMEN MALLIN TUNNISTETIEDOT

Suojaiveisiiri R5 - Kehys ja 6 läpinäkyvää polykarbonaattisuojusta.

D) ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE**• Pukemisohjeet**

Pue henkilönsuojain ja aseta se kasvoille niin, että visiiri peittää kasvot oikeista kohdista. Varmista hyvä istuvuus säätämällä kiinnityshihna käyttäjän kasvojen/pään mukaan. Henkilönsuojaimen suorituskyky taataan, kun se on puettu ja asetettu oikein paikalleen. Jos havaitset silmämääräisesti minkäänlaista vaurioitumista, keskeytä laitteen käyttö ja vaihda se uuteen. **Henkilönsuojaimen ei saa tehdä muutoksia.**

• Koot

Laitte on saatavilla yhdessä koossa, mutta säädettävän joustavan nauhan ansiosta se mukautuu täydellisesti mihin tahansa kasvojen muotoon.

• Pakkausmerkinnät ja säilytysohjeet

Tuote on pakattava siten, että sen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina käyttöhetken saakka ja koko käyttöiän ajan. Kyseisellä tuotteella ei ole viimeistä käyttöpäivää. Tuote on säilytettävä ehjässä ja suljetussa pakkauksessa, suojattuna suorilta lämmönlähteiltä.

• Hävittäminen

Jos laitteet eivät ole kontaminoituneet erityisillä aineilla tai tuotteilla, ne voidaan hävittää tavallisena muovijätteenä; muussa tapauksessa ne on hävitettävä voimassa olevien erikoisjätettä koskevien säädösten mukaisesti.

E) ERITYISET PUHDISTUS- JA/HOI DESINFIOINTIOHJEET

Puhdista visiiri kostuttamalla liina alkoholittomalla saippualla ja desinfiointiaineella. Pyyhi kehys ja näyttö varovasti poistaen tahrat ja lian.

F) KÄYTTÖALUETTA KOSKEVAT YKSITYISKOHDAT, SUUNNITELTU KÄYTTÖYMPÄRISTÖ, SUOJAUSTEHO JA SUORITUSKYKYOMINAISUDET

Kaikki muu kuin tässä ilmoitettu käyttö katsotaan virheelliseksi, eikä valmistaja ole vastuussa mistään mahdollisista vahingoista.

Käytetyt materiaalit - Lisätietoja on saatavilla materiaalien teknisestä tiedotteesta.

G) VAROITUKSET

- Kasvosuojukset on vaihdettava aina, kun niiden läpinäkyvyys heikkenee naarmujen tai mahdollisen samentumisen vuoksi.
- Iskuille altistuneita kasvosuojuksia ei saa käyttää, vaan ne on poistettava käytöstä ja vaihdettava uusiin.
- Pue henkilönsuojain ennen altistumista riskille, jolta se on suunniteltu suojaamaan.
- Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia alkuperäisiä varaosia.
- Henkilönsuojaimen on oltava asennettuna kaikilta osin maksimaalisen suojan varmistamiseksi.

H) ILMOITETTU LAITOS

R5-mallin visiiri kuuluu henkilönsuojainten luokkaan II, ja siksi se edellyttää ilmoitetun laitoksen antamaa EU-tyyppitarkastustodistusta asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti. **ILMOITETTU LAITOS N. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)**

Vaatimustenmukaisuuslinkit: info@larident.it.

I) MERKINTÄ

Linssin merkintöjen tunnistus

CE – LARIDENT – R5

CE (CE-merkintä) – LARIDENT (Valmistaja) – R5 (Tuotenimi)

Kehyksen merkintöjen tunnistus

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Valmistaja) – R5 (Tuotenimi) – CE (CE-merkintä)

J) KÄYTTÖOHJEISSA JA MERKINNÖISSÄ KÄYTETYT SYMBOLIT

Käyttöohjeissa ja pakkauksessa käytetyt symbolit perustuvat standardiin UNI EN ISO 16321-1:2022 seuraavasti




Symboli: lue käyttöohjeet huolellisesti




CE-Vaatimustenmukaisuusmerkintä

K) ASENNUSOHJEET


- Kierrä kehystä niin, että tapit ja ohjaimet osoittavat käyttäjän kasvoja kohti.
- Nosta visiiri ja taivuta sitä hieman. Aloita keskeltä ja aseta visiiri ensin yläpään ohjaimeen ja liu'uta se sitten alimpaan. Kun tämä on tehty, työnnä keskimmäinen reikä keskitappiin (vaakasuoraan) niin, että henkilönsuojain alkaa muodostaa pyöreää muotoa.
- Liu'uta tässä vaiheessa visiiri ulompiin ohjaimiin ja työnnä sitten reikä tappiin (vaakasuoraan) sormillasi.
- Aseta visiiri kahteen viimeiseen ohjaimeen ja työnnä sitten reikä tappiin (vaakasuoraan).
- Peitä tuuletusaukko kalvolla.
- Lisäturvallisuuden vuoksi kiinnitä joustava lenkki työntämällä se mukavimpaan reikään.
- Visiiri on valmis.

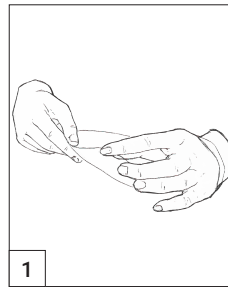


1

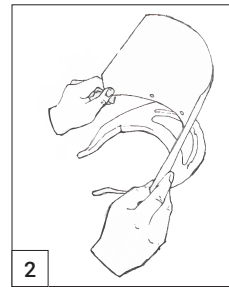


2

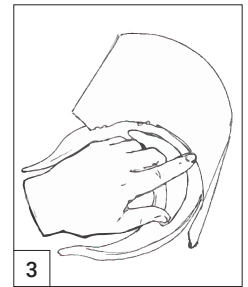


3

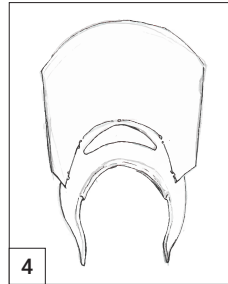


4

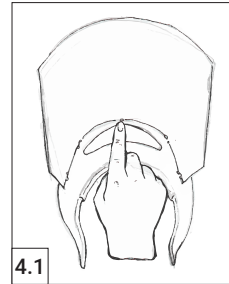

4.1

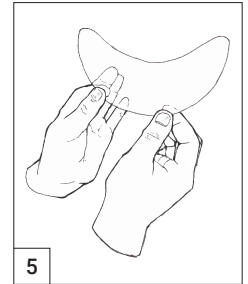

5

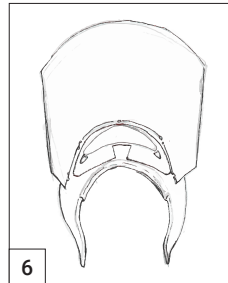

6



7