

HR

OPREMA ZA OSOBNU ZAŠTITU KATEGORIJE II U SKLADU S EUROPSKOM UREDBOM 2016/425**PROIZVEDENO U SKLADU S NORMOM UNI EN ISO 16321-1:2022**

Ovaj informativni list mora se čuvati tijekom cijelog razdoblja uporabe osobne zaštitne opreme.

A) INFORMACIJE O PROIZVOĐAČU

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

E-pošta: info@larident.it - web stranica: www.larident.it

B) REFERENTNI PROPISI

Svrha ovog informativnog lista je pružiti smjernice o zaštitnim značajkama, uvjetima uporabe, održavanju, čišćenju te upozorenjima i/ili ograničenjima uporabe OZO zaštitnih vizira. Osobna zaštitna oprema pružit će potrebnu razinu zaštite samo ako je neoštećena, ispravno nošena i pričvršćena. Ako imate bilo kakve sumnje ili trebate pojašnjenje, obratite se svojem neposrednom nadređenom i, po potrebi, proizvođaču te proučite upute za uporabu.

Uputstvo za uporabu priloženo je uz svako pakiranje i treba ga pažljivo pročitati prije uporabe. Ova informativna napomena sastavljena je u skladu sa standardom UNI EN ISO 16321-1:2022.

Osobna zaštitna oprema (OZO) certificirana je kao OZO kategorije II za uređaje namijenjene zaštiti korisnika od rizika od udara manjim udarcima stranih predmeta; u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Europske uredbe 2016/425. Uređaj R5 u skladu je sa zahtjevima norme UNI EN ISO 16321-1:2022, osim vidnog polja koje je ograničeno u gornjem dijelu. Zajamčen je pogled prema naprijed i prema dolje.

C) IDENTIFIKACIJA MODELA ZAŠITNOG UREDJAJA

R5 zaštitni vizir - Okvir sa 6 prozirnih polikarbonatnih leća.

D) UPUTE ZA SKLADIŠTENJE, UPOTREBU I ODRŽAVANJE**• Upute za nošenje**

Obucite osobnu zaštitnu opremu i pravilno ju postavite na lice, pazeći da vizir pokriva lice na odgovarajućim mjestima i da dobro prianja prilagodnom trake licu i glavi korisnika. Učinkovitost osobne zaštitne opreme zajamčena je kada je pravilno nošena i postavljena. Ako primijetite bilo kakve znakove habanja i trošenja, prestanite koristiti sredstvo i zamijenite ga novim. **Izmjene OZO-a nisu dopuštene.**

• Veličine

Uređaj je dostupan u jednoj veličini, ali zahvaljujući podesivoj elastičnoj traci savršeno se prilagođava svakom obliku lica.

• Bilješke o pakiranju i upute za skladištenje

Konačno pakiranje proizvoda mora se obaviti na način koji osigurava da ostane nepromijenjeno do trenutka uporabe i tijekom cijelog roka trajanja. Ovaj proizvod nema rok trajanja; Proizvod se mora čuvati u izvornom, neotvorenom pakiranju i na mjestu zaštićenom od izravnih izvora topline.

• Odlaganje

Ako uređaji nisu kontaminirani specifičnim tvarima ili proizvodima, mogu se odlagati kao obični plastični otpad; inače se moraju odlagati u skladu s važećim zakonskim propisima o opasnom otpadu.

E) SPECIFIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I/ILI DEZINFEKCIJU

Za čišćenje vizira navlažite krpu sapunom i dezinficijensom bez alkohola, zatim nježno obrišite okvir i vizir kako biste uklonili mrlje i prljavštinu.

F) DETALJI O PODRUČJU PRIMJENE, PREDVIĐENOM RASPONU UVJETA OKOLINE ZA UPOTREBU, ZAŠTITNIM SPOSOBNOSTIMA I RAVNJA KARAKTERISTIKAMA

Svaka upotreba koja nije navedena smatra se nepravilnom, a proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu nastalu štetu.

Korišteni materijali - Za daljnje informacije, molimo pogledajte listu materijala.

G) UPOZORENJA

- Zaštitne vizire treba zamijeniti kad god je njihova prozirnost narušena ogrebotinama ili zamućenjem.
- Vizire koji su bili izloženi udarcu ne smije se koristiti; isti se moraju odbaciti i zamijeniti.
- Obucite osobnu zaštitnu opremu prije izlaganja riziku za koji je namijenjena.
- Koristite samo izvorne rezervne dijelove koje isporučuje proizvođač.
- OZO mora biti pričvršćena u svim svojim dijelovima kako bi se osigurala maksimalna zaštita.

H) PRIJAVLJENO TIJELO

Vizir modela R5 spada u kategoriju II osobne zaštitne opreme; stoga zahtijeva odobrenje tipa EU u skladu s Uredbom (EU) 2016/425, izdano od strane obaviještenog tijela.: Obaviješteno tijelo br. 0426 – ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)

Poveznica za sukladnost: info@larident.it.

I) OZNAČAVANJE

identifikacija oznake na leći

CE – LARIDENT – R5

CE (Oznaka CE) – LARIDENT (Proizvođač) – R5 (Naziv proizvoda) identifikacija, označavanje i montaža

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Proizvođač) – R5 (Naziv proizvoda) – CE (Oznaka CE)

J) SIMBOLI KORIŠTENI NA UPUTAMA I OZNAČAVANJE

Simboli koji se koriste na uputama i kutiji su sljedeći, u skladu sa standardom UNI EN ISO 16321-1:2022




Molimo pažljivo pročitajte upute




CE Oznaka sukladnosti

K) UPUTE ZA SKLAPANJE


1. Okrenite okvir tako da klinovi i vodilice budu okrenuti prema korisnikovom licu.
2. Podignite vizir i lagano ga savijte. Počevši od središta, prvo umetnite vizir u najvišu vodilicu, a zatim ga gurnite u najnižu. Nakon što to učinite, gurnite središnju rupu u središnji klin (horizontalno) tako da OZO počne poprimati kružni oblik.
3. U ovom trenutku gurnite vizir u najudaljenije vodilice, a zatim prstima gurnite rupu u klin (horizontalno).
4. Umetnite vizir u posljednje dvije vodilice, a zatim gurnite rupu u klin (horizontalno).
5. Prekrijte ventilacijski otvor folijom.
6. Za dodatnu sigurnost pričvrstite elastičnu petlju umetanjem u najudobniji otvor.
7. Vizir je spreman.

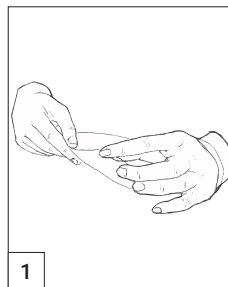


1

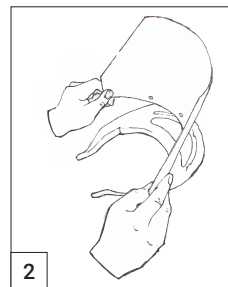


2

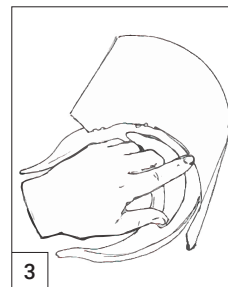


3

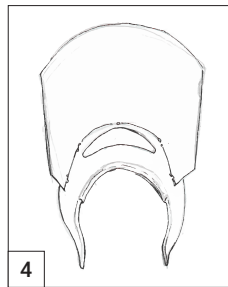


4

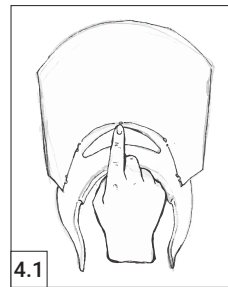


4.1

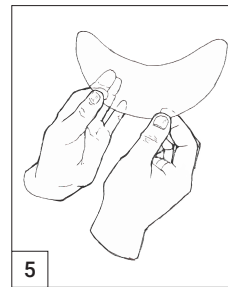

5

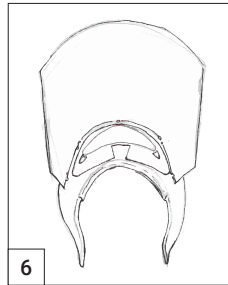

6

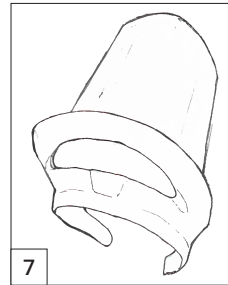

7