

SV

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING I KATEGORI II ENLIGT DEN EUROPEISKA FÖRORDNINGEN 2016/425**TILLVERKAD I ENLIGHET MED STANDARD SS-EN ISO 16321-1:2022**

Detta informationsmeddelande måste sparas under hela den tid som den personliga skyddsutrustningen används.

A) INFORMATION OM TILLVERKAREN

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-post: info@larident.it - webbplats: www.larident.it

B) REGULATORISKA REFERENSER

Syftet med detta informationsmeddelande är att klargöra skyddsegenskaper, användningsförhållanden, underhåll, tvätt samt varningar och/eller begränsningar för användning av PSU-skyddsvisir. PSU:n kan endast erbjuda den nödvändiga skyddsnivån om den är intakt, korrekt buren och knäppt. Om du har några tvivel eller behöver förtydliganden, kontakta din överordnade och, vid behov, tillverkaren och läs bruksanvisningen.

Informationsmeddelandet medföljer varje förpackning och bör läsas noggrant före användning. Detta informationsmeddelande är upprättat i enlighet med SS-EN ISO 16321-1:2022.

PSU:n har certifierats som PSU i kategori II för utrustningar som är avsedda att användas för att skydda den person som bär dem mot risken att träffas av lätta stötar med främmande kroppar; i enlighet med de väsentliga hälso- och säkerhetskraven i den europeiska förordningen 2016/425. R5-enheten uppfyller kraven i standarden UNI EN ISO 16321-1:2022, förutom synfältet som är begränsat i den övre delen. Sikt framåt och nedåt garanteras.

C) IDENTIFIKATION AV SKYDDSUTRUSTNINGENS MODELL

Skyddsvisir R5 - Båge med 6 genomskinliga polykarbonatskärmar.

D) ANVISNINGAR FÖR FÖRVARING, ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL**• Påtagningsanvisningar**

Ta på dig PSU:n och placera den korrekt på ansiktet så att skärmen täcker ansiktet på rätt ställen och se till att den sitter åt ordentligt genom att justera remmen efter användarens ansikte/huvud. Den personliga skyddsutrustningens prestanda garanteras när den bärs och placeras på rätt sätt. Om någon försämring är visuellt märkbar ska du avbryta användningen och ersätta den med en ny utrustning. **Ändringar av PSU:n är inte tillåtna.**

• Storlekar

Enheten finns i en storlek men tack vare det justerbara elastiska bandet anpassar den sig perfekt till alla ansiktsformer.

• Information om förpackning och förvaringsanvisningar

Den slutliga förpackningen av produkten måste utföras på ett sådant sätt att den förblir oförändrad under hela användningstiden. Produkten i fråga har inget utgångsdatum; produkten måste förvaras i oöppnad och förseglad förpackning på avstånd från direkta värmekällor.

• Kassering

Om utrustningarna inte har förorenats med speciella ämnen eller produkter kan de kasseras som vanligt plastavfall, annars måste de kasseras i enlighet med de lagstadgade kraven för specialavfall.

E) SPECIFIKA ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING OCH/ELLER DESINFEKTION

Rengör visiret genom att fukta en trasa med alkoholfri tvål och desinfektionsmedel och torka försiktigt över bågen och skärmen för att ta bort fläckar och smuts.

F) DETALJER OM AVSETT MILJÖANVÄNDNINGSTID, SKYDDSKAPACITET OCH PRESTANDAEGENSKAPER

All annan användning än den angivna betraktas som felaktig och eventuella skador kan inte tillskrivas tillverkaren.

Använda material - För mer information se materialets tekniska datablad.

G) VARNINGAR

- Skyddsvisir måste bytas ut när genomskinligheten har försämrats av linjer eller eventuell opacitet.
- Visir som har utsatts för stötar får inte användas utan måste kasseras och bytas ut.
- Använd personlig skyddsutrustning innan du utsätter dig för den risk som den personliga skyddsutrustningen är avsedd att skydda mot.
- Använd endast originalreservdelar som tillhandahålls av tillverkaren.
- Alla delar av den personliga skyddsutrustningen måste vara monterade för att säkerställa maximalt skydd.

H) ANMÄLT ORGAN

Visiret av modell R5 tillhör PSU-kategori II och har därför behov av EU-typgodkännande i enlighet med EU-förordning 2016/425 av ett anmält organ: Anmält organ nr 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)

Länkar för överensstämmelse: info@larident.it.

I) MÄRKNING

Identifikation av märkning på lins

CE – LARIDENT – R5

CE (CE-märkning) – LARIDENT (Tillverkare) – R5 (Produkts namn)

Identifikation av bågens märkning

LARIDENT – R5 – CE

LARIDENT (Tillverkare) – R5 (Produkts namn) – CE (CE-märkning)

J) SYMBOLER SOM ANVÄNDS I ANVISNINGAR OCH MÄRKNINGAR

De symboler som används på anvisningar och låda är följande, baserat på förordning SS-EN ISO 16321-1:2022




Symbol läs anvisningarna noggrant




CE-märkning för överensstämmelse

K) MONTERINGSANVISNINGAR


1. Roter ramen så att stiften och styrningarna är vända mot användarens ansikte.
2. Lyft upp visiret och böj det lätt. Börja från mitten och sätt först in visiret i den högsta styrningen och skjut sedan in det i den lägsta. När detta är gjort, tryck in det centrala hålet i det centrala stiftet (horisontellt) så att den personliga skyddsutrustningen börjar anta en cirkulär form.
3. Skjut nu in visiret i de yttersta styrningarna och tryck sedan in hålet i stiftet (horisontellt) med fingrarna.
4. Sätt in visiret i de två sista styrningarna och tryck sedan in hålet i stiftet (horisontellt).
5. Använd filmen för att täcka ventilationshålet.
6. För extra säkerhet, fäst den elastiska ögla genom att föra in den i det bekvämare hålet.
7. Visiret är klart.

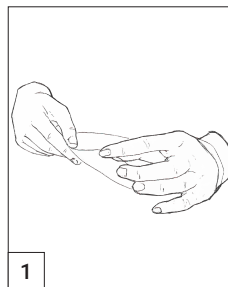


1

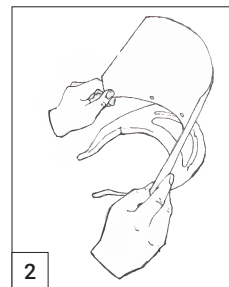


2

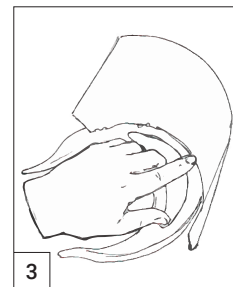


3

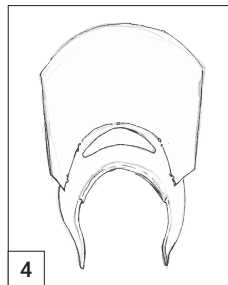


4

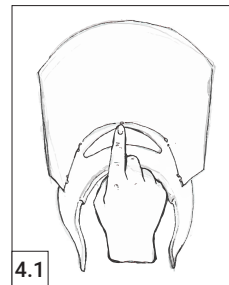

4.1

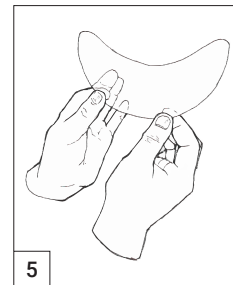

5

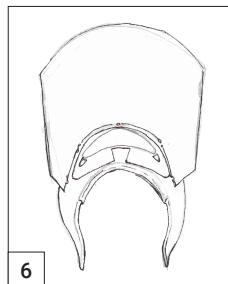

6



7