

## BG

**КАТЕГОРИЯ 2 ИНДИВИДУАЛНО ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ 2016/425****ИЗРАБОТЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С EN ISO 16321-1:2022**

Това информационна бележка трябва да се съхранява през целия период на използване на ЛПС.

**А) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Телефон +39 0185 938068-  
Факс +39 0185 938595

електронна поща: info@larident.it - сайт: www.larident.it

**В) РЕГУЛАТОРНИ ПРЕПАТКИ**

Целта на тази информационна бележка е да предостави разяснения относно защитните характеристики, условията на употреба, поддръжката, измиването и предупрежденията и/или ограниченията за използването на защитните козирки на личните предпазни средства. Личните предпазни средства могат да осигурят необходимото ниво на защита само ако са непокътнати, правилно носени и закрепени. Ако имате какви съмнения или се нуждаете от разяснения, свържете се с вашия ръководител и, ако е приложимо, с производителя и направете справка в ръководството за експлоатация.

Информационната бележка се предоставя с всяка опаковка и трябва да бъде прочетена внимателно преди употреба. Това Информационната бележка е изготвено в съответствие с EN ISO 16321-1:2022.

ЛПС е сертифицирана като ЛПС от категория II за устройства, предназначени да се използват за предпазване на потребителя от риска от леки удари с чужди тела. Устройството R66 е произведено в съответствие със съществените изисквания за безопасност и опазване на здравето, посочени в Европейски регламент 2016/425, и съгласно стандарт EN ISO 16321-1:2022.

**С) ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МОДЕЛА НА ЗАЩИТНОТО УСТРОЙСТВО**  
Защитен визиор R66 - Рамка с 6 прозрачни поликарбонатни екрана.

**Д) ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, УПОТРЕБА И ПОДДЪРЖАНЕ****• Инструкции за носене**

Носете личните предпазни средства и ги поставете правилно на лицето, като щитът покрива лицето на правилните места и се уверите, че приляга плътно, като регулирате дантелата според лицето/главата на потребителя. Ефективността на личните предпазни средства е гарантирана, когато те са правилно носени и поставени. Ако визуално се забелязва влошаване на състоянието, прекратете използването му и го заменете с ново устройство.

**Модификациите на ЛПС не са разрешени.**

**• Размер**

Устройството се предлага в един размер, но с помощта на регулируемата каишка се адаптира идеално към всяка форма на лицето.

**• Забележки за опаковката и инструкции за съхранение**

Окончателното опаковане на продукта трябва да се извърши по такъв начин, че той да остане непроменен до и през целия период на употреба. Въпросният продукт няма срок на годност; продуктът трябва да се съхранява в неотворена и запечатана опаковка, далеч от преки източници на топлина.

**• Изхвърляне**

Ако устройствата не са били замърсени със специални вещества или продукти, те могат да се изхвърлят като нормални пластмасови отпадъци, в противен случай трябва да се изхвърлят в съответствие със законовите изисквания за специални отпадъци.

**Е) СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И/ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ**

За да почистите козирката, намокрете кърпа със сапуни и дезинфектанти на безалкохолна основа и избършете внимателно рамката и екрана, като отстраните петната и замърсяванията.

**Ф) ПОДРОБНОСТИ ЗА ОБЛАСТТА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЧНИЯ ИНТЕРВАЛ НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, ЗАЩИТНИТЕ КАПАЦИТЕТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

Всяка употреба, различна от посочената, се счита за неправилна и всяка повреда не е по вина на производителя.

**Използвани материали** - За повече информация вижте информационния лист за материала.

**Г) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- Защитните визьори трябва да се сменят винаги, когато прозрачността е нарушена от линии или е възможно да е непрозрачна.
- Козирките, които са били подложени на удар, не трябва да се използват и трябва да се изхвърлят и заменят.
- Носете личните предпазни средства, преди да се изложите на риска,

срещу който те са предназначени.

- Използвайте само оригинални резервни части, доставени от производителя.
- ЛПС трябва да бъде монтирана във всичките си части и е предназначена за челни удари. Той не предпазва от удари отгоре поради пространството между екрана и рамката.

**Н) УВЕДОМЕН ОРГАНИЗЪМ**

Козирката на модела R66 принадлежи към категория II на личните предпазни средства и поради това има необходимост от одобрение на типа на ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425 от нотифициран орган: Онотифициран орган № 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)  
Връзки за съответствие: info@larident.it.

**И) МАРКИРАНЕ**

Идентифициране на маркировката върху лещата

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (Марка за съответствие) – LARIDENT (Производител) – R66 (Име на продукта) – 1 (Повишена оптична продуктивност)

Идентификация на маркировката на рамката

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (Стандарт) – LARIDENT (Производител) – 1-M

(Изпитвателна глава ISO 18526-4) – R66 (Име на продукта) – CE (Маркировка CE)

АДРЕС: www.larident.it (потребителят може да намери пълния адрес на производителя в информационна бележка и на този уебсайт)

**Ж) СИМВОЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ИНСТРУКЦИИТЕ И ЕТИКЕТИРАНЕТО**

Символиката, използвана върху инструкциите и кутията, е следната, въз основа на регламента UNI EN ISO 16321-1:2022



Символ Прочетете  
внимателно инструкциите



Маркировка за  
съответствие CE

**К) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ**


- Отстранете защитните филми от двете страни.
- Екранът трябва да бъде разположен от външната страна на рамката, с отвора на носа надолу.
- Поставете екрана в двата странични капака на стойката, като ги прекарате през по-големия отвор в екрана и след това ги застопорите с по-малкия.
- Не забравяйте да регулирате козирката според формата на лицето си, като я придържате плътно до скулите.
- Козирката е готова.




1



2

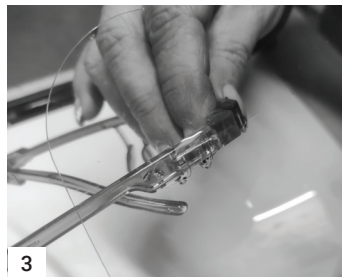

3

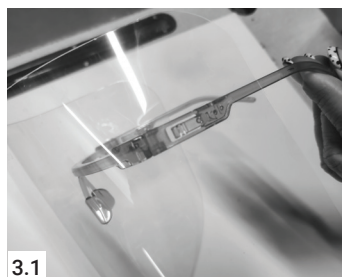

3.1



4-5