

IT

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SECONDA CATEGORIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/425 FABBRICATI SECONDO NORMA UNI EN ISO 16321-1:2022

La presente Nota Informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI in uso.

A) INFORMAZIONI SUL FABBRICANTE

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - sito: www.larident.it

B) RIFERIMENTI INFORMATIVI

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire chiarimenti circa le caratteristiche di protezione, le condizioni d'utilizzo, la manutenzione, i lavaggi e le avvertenze e/o limitazioni d'uso del DPI Visiere Protettive. Il DPI potrà offrire il necessario livello di protezione solo se integro, correttamente indossato ed allacciato. Nel caso di dubbi o richieste di chiarimento contattare il proprio superiore e, nel caso, il fabbricante e consultare il manuale di istruzioni.

La Nota Informativa viene fornita con ogni confezione e deve essere letta attentamente prima dell'utilizzo della stessa. La presente Nota Informativa viene redatta secondo la norma UNI EN ISO 16321-1:2022.

Il DPI è stato certificato come DPI di II categoria per dispositivi destinati ad essere impiegati per salvaguardare la persona che li indossa dal rischio di essere colpita da lievi impatti con corpi estranei. Il dispositivo R66 è fabbricato secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento Europeo 2016/425 e secondo la norma UNI EN ISO 16321-1:2022.

C) IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

Visiera protettiva R66 - Montatura con 6 schermi trasparenti in policarbonato.

D) ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE**• Istruzioni di indosso**

Indossare il DPI e posizionarlo correttamente sul viso con lo schermo che copra il viso nei punti giusti e facendo in modo che sia ben aderente regolando il laccio in base al viso/testa dell'utilizzatore. Le prestazioni del DPI sono garantite quando è correttamente indossato e posizionato. Qualora si apprezzasse visivamente un qualsiasi deterioramento sospendere l'utilizzo e provvedere alla sostituzione dello stesso con un nuovo dispositivo. **Non sono consentite modifiche del DPI.**

• Taglie

Il dispositivo è previsto in Taglia Unica ma attraverso l'utilizzo del laccetto regolabile si adatta perfettamente ad ogni forma del viso.

• Note sul confezionamento e istruzioni per la conservazione

Il confezionamento finale del prodotto deve essere effettuato in modo da conservarlo inalterato fino al momento dell'uso e per tutto il periodo di impiego. Il prodotto in oggetto non ha scadenza; il prodotto deve essere conservato in confezione integra e sigillata, purché lontano dalle fonti di calore dirette.

• Smaltimento

Se i dispositivi non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti plastici, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

E) ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA PULIZIA E/O DISINFEZIONE

Per la pulizia della visiera bagnare un panno con saponi e disinfettanti a base non alcolica e passare delicatamente sulla montatura e sullo schermo eliminando le macchie e lo sporco.

F) DETTAGLI SUL CAMPO DI UTILIZZO, L'INTERVALLO AMBIENTALE DI UTILIZZO PREVISTO, LE CAPACITÀ DI PROTEZIONE E LE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Ogni uso diverso da quanto indicato è da considerarsi improprio e gli eventuali danni non sono imputabili al fabbricante.

Materiali utilizzati - Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica dei materiali.

G) AVVERTENZE

- Le visiere protettive devono essere sostituite ogni qual volta la trasparenza sia compromessa per righe o eventuale opacità.
- Le visiere che sono state soggette a impatti non devono essere usate e devono essere scartate e sostituite.
- Indossare il DPI prima di esporsi al rischio contro il quale il DPI è progettato.
- Utilizzare solamente ricambi originali forniti dal produttore.
- Il DPI deve essere montato in tutte le sue parti ed è stato progettato per impatti frontali. Non protegge da impatti dall'alto per via dello spazio tra lo schermo e la montatura.

H) ORGANISMO NOTIFICATO

La visiera modello R66 appartiene alla II Categoria dei DPI per questo ha bisogno dell'emissione dell'UE del tipo in conformità al regolamento dal Regolamento (UE) 2016/425 da parte di un ente notificato: Organismo notificato N. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI) Link conformità: info@larident.it.

I) MARCATURA

Identificazione marcatura su lente

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (Marchio CE) – LARIDENT (Fabbricante) – R66 (Nome prodotto) – 1 (Prestazioni ottiche incrementate)

Identificazione marcatura montatura

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (Norma) – LARIDENT (Fabbricante) – 1-M (Testa di prova ISO 18526-4) – R66 (Nome prodotto) – CE (Marchio CE)

INDIRIZZO: www.larident.it (l'utilizzatore potrà trovare nella nota informativa e su questo sito l'indirizzo completo del fabbricante)

J) SIMBOLI IMPIEGATI SU ISTRUZIONI E LABELLING

La simbologia impiegata su istruzioni e scatola è la seguente, sulla base del regolamento UNI EN ISO 16321-1:2022



Simbolo leggere attentamente le istruzioni



Marchio di conformità CE

K) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


- Togliere le pellicole protettive da entrambi i lati.
- Lo schermo deve essere posizionato all'esterno della montatura, con apertura nasale verso il basso.
- Inserire lo schermo nelle due alette laterali della montatura, facendole passare attraverso il foro più grande dello schermo per poi bloccarle con quello più piccolo.
- Ricordarsi di regolare la visiera in base alla forma del viso facendo in modo che sia ben aderente agli zigomi.
- La visiera è pronta.




1



2

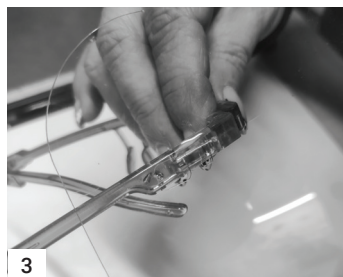

3

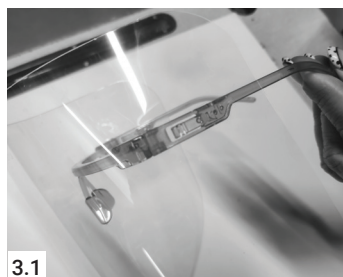

3.1



4-5