

LV

OTRĀS KATEGORIJAS INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI SASKAŅĀ AR EIROPAS REGULU 2016/425**RAŽOTI SASKAŅĀ AR STANDARTU UNI EN ISO 16321-1:2022**

Šī informatīvā piezīme ir jāsaglabā visu individuālā aizsardzības līdzekļa (IAL) lietošanas laiku.

A) INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tālrunis +39 0185 938068 - Fakss +39 0185 938595

e-pasta adrese: info@larident.it - vietnē: www.larident.it

B) NORMATĪVĀS ATSAUCES

Šīs informatīvās piezīmes mērķis ir sniegt skaidrojumus par aizsardzības līdzekļa (aizsargvisieru) aizsardzības funkcijām, lietošanas nosacījumiem, apkopi, mazgāšanu un brīdinājumiem un/vai IAL lietošanas ierobežojumiem. IAL var nodrošināt nepieciešamo aizsardzības līmeni tikai tad, ja tas ir nebojāts, pareizi uzlikts un nostiprināts. Šaubu vai neskaidrību gadījumā sazinieties ar savu tiešo vadītāju un, ja nepieciešams, ar ražotāju, kā arī skatiet lietošanas instrukciju.

Informatīvā piezīme tiek pievienota katram iepakojumam, un pirms tā lietošanas tā ir uzmanīgi jāizlasa. Šī informatīvā piezīme ir sagatavota saskaņā ar standartu UNI EN ISO 16321-1:2022.

Šis IAL ir sertificēts kā II kategorijas IAL ierīcēm, kas paredzētas, lai aizsargātu personu, kas tās valkā, pret risku tikt pakļautai nelieliem triecieniem no svešķermeņiem. Ierīce R66 ir ražota saskaņā ar Eiropas Regulas 2016/425 pamatprasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošumu un standartu UNI EN ISO 16321-1:2022.

C) AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA MODEĻA IDENTIFIKĀCIJA

Aizsargvisieris R66 - letvars ar 6 caurspīdīgiem polikarbonāta ekrāniem.

D) UZGLABĀŠANAS, LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJAS**• Uzlikšanas instrukcijas**

Uzlieciet IAL un novietojiet to pareizi uz sejas tā, lai ekrāns nosegtu seju vajadzīgajās vietās; nodrošiniet ciešu piekļaušanos, noregulējot siksnīņu atbilstoši lietotāja sejas/galvas formai. IAL veikspēja ir garantēta tikai tad, ja tas ir pareizi uzlikts un novietots. Ja vizuāli tiek konstatēti jebkādi bojājumi, pārtrauciet tā lietošanu un nomainiet to pret jaunu ierīci. **Nav atļauts veikt nekādas IAL izmaiņas.**

• Izmēru tabula

Ierīce ir pieejama vienā izmērā (universāls izmērs), taču, pateicoties regulējamai siksnīņai, tā perfekti pielāgojas jebkurai sejas formai.

• Piezīmes par iepakojumu un uzglabāšanas instrukcijas

Izstrādājuma galīgais iepakojums jāveic tā, lai saglabātu to nemainīgu līdz lietošanas brīdim un visā lietošanas laikā. Šim izstrādājumam nav derīguma termiņa beigu datuma; Izstrādājums jāuzglabā nebojātā un aizsargotā iepakojumā, sargājot no tiešiem siltuma avotiem.

• Likvidēšana

Ja ierīces nav piesārņotas ar īpašām vielām vai produktiem, tās var likvidēt kā parastos plastmasas atkritumus; pretējā gadījumā tās jālikvidē saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par īpašiem atkritumiem.

E) ĪPAŠAS TĪRĪŠANAS UN/VAI DEZINFEKCIJAS INSTRUKCIJAS

Lai notīrītu aizsargvisieri, samitriniet drānu ar ziepēm un bezalkoholiskiem dezinfekcijas līdzekļiem un uzmanīgi noslaukiet ietvaru un ekrānu, notīrot traipus un netīrumus.

F) INFORMĀCIJA PAR LIETOŠANAS JOMU, PAREDZĒTO LIETOŠANAS VIDES DIAPAZONU, AIZSARDZĪBAS SPĒJĀM UN VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMIEM

Jebkāda lietošana, kas atšķiras no norādītās, ir uzskatāma par nepareizu, un ražotājs nav atbildīgs par iespējamajiem zaudējumiem.

Izmantotie materiāli - Papildinformāciju skatiet materiālu tehniskajā datu lapā.

G) BRĪDINĀJUMI

- Aizsargvisieri ir jānomaina ikreiz, kad to caurspīdīgumu ietekmē skrāpējumi vai iespējams nespodrums.
- Visierus, kas bijuši pakļauti triecieniem, nedrīkst lietot, tie ir jābrāķē un jānomaina.
- Uzvelciet IAL pirms saskares ar risku, pret kuru šis IAL ir izstrādāts.
- Izmantojiet tikai ražotāja piegādātās oriģinālās rezerves daļas.
- IAL ir jābūt pilnībā samontētam, un tas ir izstrādāts aizsardzībai pret priekšpusē triecieniem. Tas neaizsargā pret triecieniem no augšas, jo starp ekrānu un ietvaru ir atstarpe.

H) PAZIŅOTĀ IESTĀDE

R66 modeļa aizsargvisieris pieder pie II kategorijas IAL, tādēļ tam ir nepieciešams paziņotās iestādes izdots ES tipa pārbaudes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) 2016/425: Paziņotā iestāde Nr. 0426 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milāna (MI)

Atbilstības deklarācijas saite: info@larident.it.

I) MARKĒJUMS

Lēcas markējuma identifikācija

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (CE markējums) – LARIDENT (Ražotājs) – R66 (Produkta nosaukums) – 1 (Uzlabota optiskā veikspēja)

Identificação da marcação da armaçãoatura

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (Standarts) – LARIDENT (Ražotājs) – 1-M (ISO 18526-4 testa galva) – R66 (Produkta nosaukums) – CE (CE markējums)

ADRESE: www.larident.it (lietotājs var atrast pilnu ražotāja adresi šajā informatīvajā piezīmē un šajā tīmekļa vietnē)

J) INSTRUKCIJĀS UN MARKĒJUMĀ IZMANTOTIE SIMBOLI

Instrukcijās un uz kastes izmantotie simboli ir šādi, pamatojoties uz standartu UNI EN ISO 16321-1:2022



Simbols: rūpīgi izlasiet instrukciju



CE atbilstības markējums

K) MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS


1. Noņemiet aizsargplēves no abām pusēm.
2. Ekrānam jāatrodas ietvara ārpusē, nina atverei jābūt vērstai uz leju.
3. Ievietojiet ekrānu abās ietvara sānu cilpās, izvelkot tās caur ekrāna lielāko atveri un pēc tam nofiksējot tās mazākajā atverē.
4. Neaizmirstiet pielāgot aizsargvisieri savai sejas formai tā, lai tas cieši piekļautos vaigu kauliem.
5. Aizsargvisieris ir gatavs lietošanai.




1



2

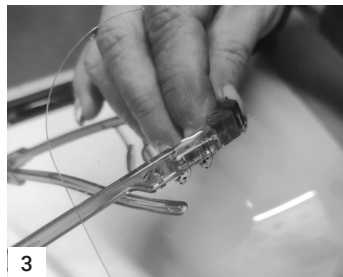

3

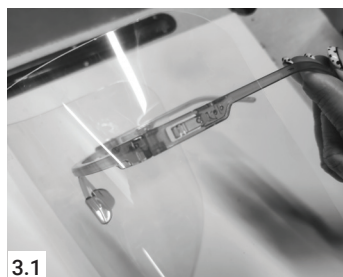

3.1



4-5