

PT

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE SEGUNDA CATEGORIA AO ABRIGO DO REGULAMENTO EUROPEU 2016/425 FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA UNI EN ISO 16321-1:2022

A presente nota informativa deve ser conservada durante todo o período de vida do EPI em utilização.

A) INFORMAÇÕES DO FABRICANTE

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-mail: info@larident.it - website: www.larident.it

B) REFERÊNCIAS NORMATIVAS

O objetivo desta nota informativa é esclarecer as características de proteção, as condições de utilização, a manutenção, a lavagem e as advertências e/ou limitações de utilização do EPI Viseiras de Proteção Facial. O EPI só pode oferecer o nível de proteção necessário se estiver intacto, corretamente usado e apertado. Se tiver dúvidas ou necessitar de esclarecimentos, contacte o seu supervisor e, se aplicável, o fabricante e consulte o manual de instruções.

O aviso de informação é fornecido com cada embalagem e deve ser lido cuidadosamente antes da utilização. Esta nota informativa foi elaborada em conformidade com a norma EN ISO 16321-1:2022.

O EPI foi certificado como EPI de categoria II para os dispositivos destinados a serem utilizados para proteger o utilizador contra o risco de ser atingido por impactos ligeiros com corpos estranhos. O equipamento R66 é fabricado em conformidade com os requisitos essenciais de saúde e segurança do Regulamento Europeu 2016/425 e de acordo com a norma UNI EN ISO 16321-1:2022.

C) IDENTIFICAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

Viseira de proteção facial R66 - Armação com 6 visores de policarbonato transparente.

D) INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO**Instruções de utilização**

Equipar o EPI e posicioná-lo corretamente no rosto, com o visor a cobrir o rosto nos sítios certos e certificando-se de que fica bem ajustado, ajustando o cordão de acordo com o rosto/cabeça do utilizador. O desempenho do EPI é garantido quando este é corretamente utilizado e posicionado. Se for visível qualquer deterioração, interromper a utilização e substituir o equipamento por um novo. **Não são permitidas modificações ao EPI.**

Tamanhos

O dispositivo é fornecido num único tamanho, mas usando a correia ajustável, adapta-se perfeitamente a qualquer formato de rosto.

Notas de embalagem e instruções de conservação

O embalamento final do produto deve ser efetuado de forma a manter-se inalterado até ao momento de uso e durante todo o período de utilização. O produto em causa não tem prazo de validade; o produto deve ser conservado em embalagens fechadas e seladas, longe de fontes de calor diretas.

Eliminação

Se os dispositivos não tiverem sido contaminados com substâncias ou produtos especiais, podem ser eliminados como resíduos de plástico normais; caso contrário, devem ser eliminados de acordo com os requisitos legais para resíduos especiais.

E) INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DE LIMPEZA E/OU DESINFECÇÃO

Para limpar a viseira, humedeça um pano com sabões e desinfetantes sem álcool e passe suavemente sobre a armação e visor, removendo manchas e sujidade.

F) DETALHES SOBRE O CAMPO DE UTILIZAÇÃO, O INTERVALO AMBIENTAL DA UTILIZAÇÃO PREVISTA, AS CAPACIDADES DE PROTEÇÃO E AS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Qualquer utilização diferente da indicada é considerada incorreta e quaisquer danos não são da responsabilidade do fabricante.

Materiais utilizados - Para mais informações, consultar a ficha de dados do material.

G) ADVERTÊNCIAS

- As viseiras de proteção devem ser substituídas sempre que a transparência seja afetada por linhas ou por uma eventual opacidade.
- As viseiras que tenham sido sujeitas a impactos não devem ser utilizadas e devem ser eliminadas e substituídas.
- Usar o EPI antes de se expor ao risco contra o qual o EPI foi concebido.
- Utilizar apenas peças sobressalentes originais fornecidas pelo fabricante.
- O EPI deve estar montado com todas as suas partes e foi projetado para impactos frontais. Não protege contra impactos vindos de cima devido ao espaço entre o visor e a armação.

H) ORGANISMO NOTIFICADO

A viseira do modelo R66 pertence à Categoria II de EPI e, por conseguinte, necessita da emissão da UE do tipo de conformidade ao Regulamento (UE)

2016/425 por um organismo notificado: Organismo notificado N. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milão (MI)

Ligações de conformidade: info@larident.it.

I) MARCAÇÃO

Identificação da marcação na lente

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (Marcação CE) – LARIDENT (Fabricante) – R66 (Nome do produto) – 1 (Desempenho ótico aumentado)

Identificação da marcação da armação

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (Norma) – LARIDENT (Fabricante) – 1-M (Cabeça de ensaio ISO 18526-4) – R66 (Nome do produto) – CE (Marcação CE)

ENDEREÇO: www.larident.it (o utilizador pode encontrar o endereço completo do fabricante na nota informativa e neste sítio Web)

J) SÍMBOLOS UTILIZADOS NAS INSTRUÇÕES E NA ROTULAGEM

A simbologia utilizada nas instruções e na caixa é a seguinte, baseada na norma UNI EN ISO 16321-1:2022



Símbolo de ler atentamente as instruções



Marcação de conformidade CE

K) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1. Remover as películas de proteção de ambos os lados.
2. O visor deve ser posicionado na parte exterior da armação, com a abertura nasal para baixo.
3. Introduza o visor nas duas patilhas laterais da armação, passando-as pelo orifício maior do visor e fixando-as com o orifício mais pequeno.
4. Não se esqueça de ajustar a viseira à forma do seu rosto, fazendo de modo que esteja bem aderente às maçãs do rosto.
5. A viseira está pronta.




1



2

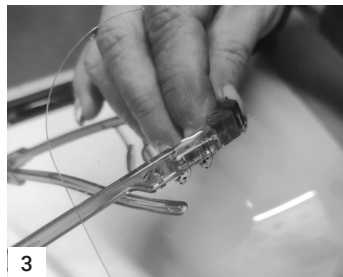

3

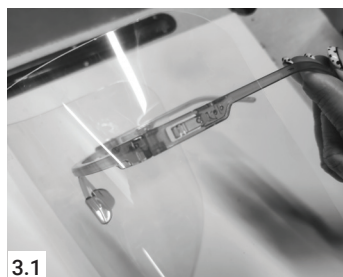

3.1



4-5