

SI

**OSEBNA VAROVALNA OPREMA DRUGE KATEGORIJE V SMISLU
EVROPSKE UREDBE 2016/425****IZDELANO V SKLADU S STANDARDOM UNI EN ISO 16321-1:2022**

Ta informativni letak je treba hraniti ves čas uporabe OVO.

A) INFORMACIJE O PROIZVAJALCU

Larident Srl

Via Lamaneigra, 12r - 16030 Tribogna (GE) - Tel +39 0185 938068 - Fax +39 0185 938595

e-pošta: info@larident.it - spletna stran: www.larident.it

B) PRAVNI PREDPISI

Namen tega informativnega letaka je podati pojasnila glede zaščitnih lastnosti, pogojev uporabe, vzdrževanja, čiščenja ter opozoril in/ali omejitev pri uporabi zaščitnih ščitov kot osebne varovalne opreme.

Osebna varovalna oprema lahko zagotovi potrebno raven zaščite le, če je nepoškodovana, pravilno nameščena in zapeta. V primeru dvomov ali zahtev po pojasnilu se obrnite na svojega nadrejenega in po potrebi na proizvajalca ter preberite navodila za uporabo.

Informacije o uporabi so priložene vsaki embalaži in jih je treba pred uporabo pozorno prebrati. Ta informativni letak je bil pripravljen v skladu s standardom UNI EN ISO 16321-1:2022.

Ta OVO je bila certificirana kot OVO kategorije II za sredstva, namenjena zaščitni osebe, ki jih nosi, pred tveganjem lahkega udarca tujih predmetov. Oprema R66 je izdelana v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami Evropske uredbe 2016/425 ter standardom UNI EN ISO 16321-1:2022.

C) IDENTIFIKACIJA MODELA VAROVALNE OPREME

Zaščitni vizir R66 - Okvir s 6 prozornimi polikarbonatnimi zaslončki.

D) NAVODILA ZA SKLADIŠČENJE, UPORABO IN VZDRŽEVANJE**• Navodila za nosenje**

Nadenite si OVO in ga pravilno namestite na obraz, tako da zaščitni ščit pokriva obraz na pravih mestih in da tesno prilega, prilagodite ga z nastavitvijo vrvic glede na obraz/glavo uporabnika. Delovanje osebne varovalne opreme je zagotovljeno, če je pravilno oblečena in nameščena. Če vizualno ugotovite kakršno koli poškodbo, prenehajte z uporabo in ga zamenjajte z novim izdelkom. **Spremembe OVO niso dovoljene.**

• Velikosti

Izdelek je na voljo v eni univerzalni velikosti, vendar se zaradi nastavljlive vrvic popolnoma prilagodi vsaki obliki obraza.

• Opombe za embalažo in navodila za skladiščenje

Končna embalaža izdelka mora biti takšna, da se ohrani v nespremenjenem stanju do trenutka uporabe in med celotnim časom uporabe. Ta izdelek nima roka uporabnosti; izdelek je treba shranjevati v nepoškodovani in zapečateni embalaži, in sicer izven dosega neposrednih virov toplote.

• Odstranjevanje

Če opreme niso bile onesnažene s posebnimi snovmi ali izdelki, jih je mogoče odstraniti kot običajne plastične odpadke; v nasprotnem primeru jih je treba odstraniti v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi za posebne odpadke.

E) POSEBNE NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN/ALI RAZKUŽEVANJE

Za čiščenje vizirja namočite krpo v milo in razkužilo na nealkoholni osnovi ter z njo nežno obrišite okvir in lečo, s čimer odstranite madeže in nečistoče.

**F) PODROBNOSTI O PODROČJU UPORABE, PREDVIDENEM
OKOLJSKEM RAZPONU UPORABE, ZAŠČITNIH ZMOŽNOSTIH IN
ZNAČILNOSTIH DELOVANJA**

Vsaka uporaba, ki odstopa od navedenih navodil, se šteje za nepravilno in proizvajalec ne odgovarja za morebitne škode.

Uporabljeni materiali - Dodatne informacije najdete v tehničnem listu materialov.

G) OPOZORILA

- Zaščitnih vizirjev je treba zamenjati, kadar je preglednost okrnjena zaradi črt ali morebitne nepreglednosti.
- Vizirjev, ki so bili izpostavljeni udarcem, se ne sme uporabljati, zato jih je treba zavreči in zamenjati.
- Osebno varovalno opremo nosite, preden se izpostavite tveganju, proti kateremu je namenjena.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je dobavil proizvajalec.
- Osebna varovalna oprema mora biti nameščena v vseh svojih delih in je zasnovana za čelne udarce. Zaradi prostora med zaslonom in okvirjem ne ščiti pred udarci od zgoraj.

H) NOTIFICIRANI ORGAN

Vizir modela R66 spada v kategorijo osebne varovalne opreme II, zato mora imeti certifikat EU o homologaciji, ki ga v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 izda notificirani organ.: Notificirani organ št. 0426 - ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI)

Povezava za skladnost: info@larident.it.

I) OZNAČEVANJE

Identifikacija označbe na leči

CE – LARIDENT – R66 – 1

CE (Oznaka CE) – LARIDENT (Proizvajalec) – R66 (Ime izdelka) – 1 (Izboljšane optične lastnosti)

Identifikacija oznake okvirja

EN-16321-1 – LARIDENT – 1-M – R66 – CE

EN-16321-1 (Standard) – LARIDENT (Proizvajalec) – 1-M (Preskusna glava ISO 18526-4) – R66 (Ime izdelka) – CE (Oznaka CE)

ADRESA: www.larident.it (uporabnik bo v obvestilu in na tej spletni strani našel popoln naslov proizvajalca)

J) SIMBOLI, UPORABLJENI NA NAVODILIH IN OZNAČEVANJU

Na navodilih in embalaži so uporabljeni naslednji simboli, v skladu s standardom UNI EN ISO 16321-1:2022



Simbol Pozorno preberite
navodila



Oznaka skladnosti CE

K) NAVODILA ZA MONTAŽO


1. Z obeh strani odstranite zaščitne folije.
2. Zaslon mora biti nameščen zunaj okvirja, z nosnim izrezom obrnjenim navzdol.
3. Zaslon vstavite v obe stranski krilci okvirja tako, da ju potisnete skozi večjo odprtino zaslona in ju nato pritrdite z manjšo odprtino.
4. Ne pozabite, da morate vizir prilagoditi obliki obraza tako, da se tesno prilega ličnicam.
5. Vizir je pripravljen.




1



2

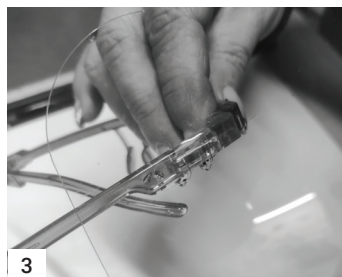

3

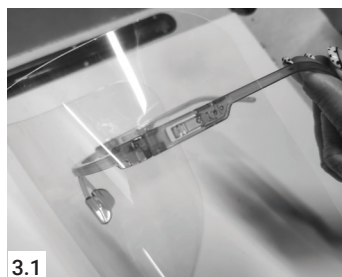

3.1



4-5